

TALOFIX^{MR}

CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO



CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRODESIS DE TOBILLO

TRAUFIX
READY TO RUN



CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRODESIS DE TOBILLO TALOFIX

ORIFICIOS DE BLOQUEO DINÁMICO Y ESTÁTICO

El orificio de bloqueo estático evita que el clavo gire y se mueva axialmente en la cavidad medular, mejorando la estabilidad de la fijación. En caso de pseudoartrosis ósea, se utiliza solo el orificio deslizante dinámico, para permitir que el clavo se mueva axialmente en la cavidad medular y se deslice ligeramente entre los huesos, para promover la consolidación.

TORNILLOS MULTI-PLANARES DISTALES

Fijación transversal para mejorar la estabilidad de la fusión. El tornillo se inserta oblicuamente hacia el calcáneo anterior o la articulación calcaneocuboidea para mejorar la resistencia a la extracción y la estabilidad.

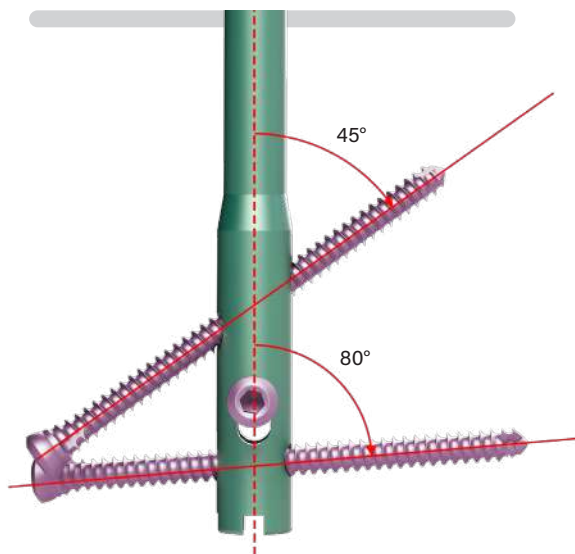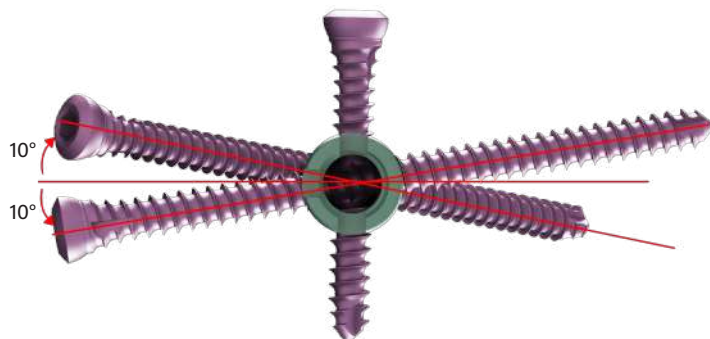

DERECHO

IZQUIERDO


DISEÑO ANATÓMICO



TRES MEDIDAS DE TAPÓN DE CIERRE




Permite compresión en orificio deslizante distal y una distancia de compresión máxima de 5 mm.

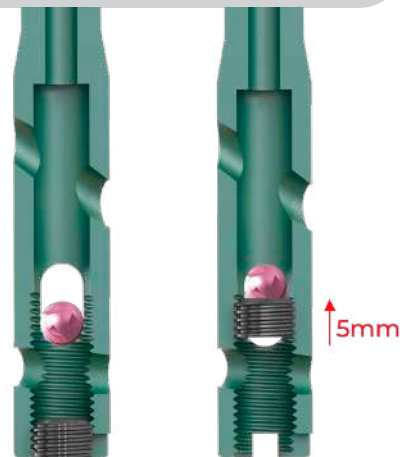

INSTRUMENTAL LIGERO Y RADIOLUCIENTE

Regleta de **FIBRA DE CARBONO** con sistema giratorio que permite una colocación más ergonómica y precisa del implante.

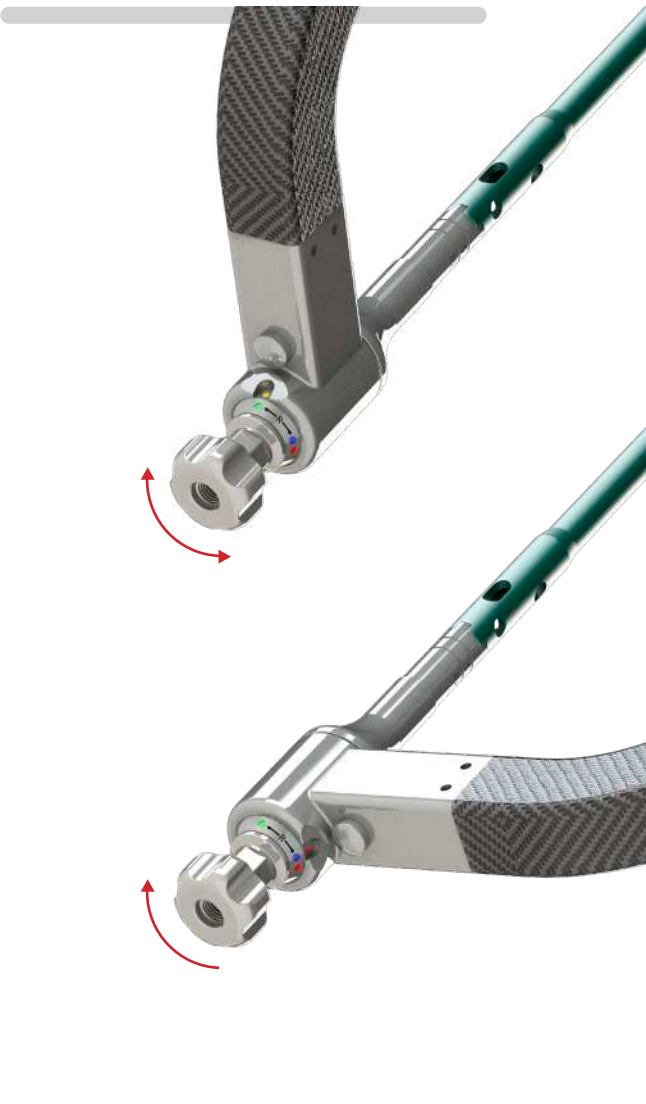

MEDIDAS

Clavo Intramedular para Artrodesis de Tobillo

Longitud	Diámetro 10mm	Diámetro 11mm	Diámetro 12mm
160mm	Izq. Cód. 222.16 / Der. Cód. 223.16	Izq. Cód. 224.16 / Der. Cód. 225.16	Izq. Cód. 226.16 / Der. Cód. 227.16
200mm	Izq. Cód. 222.20 / Der. Cód. 223.20	Izq. Cód. 224.20 / Der. Cód. 225.20	Izq. Cód. 226.20 / Der. Cód. 227.20
250mm	Izq. Cód. 222.25 / Der. Cód. 223.25	Izq. Cód. 224.25 / Der. Cód. 225.25	Izq. Cód. 226.25 / Der. Cód. 227.25

5.0mm PERNO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR TALOFIX
(Cód. 424, Longitud 25mm-110mm)

Tapón de cierre

Prolongación 0mm	Cód. 314.00
Prolongación 5mm	Cód. 314.05
Prolongación 10mm	Cód. 314.10

Design by **TRAUFIX**
READY TO RUN

HECHO EN MÉXICO



Aleación de Titanio 6Al4V ELI ASTM F136





Especial para implantes quirúrgicos

EQUIPO Talofix | ALL IN ONE KIT

INSTRUMENTAL E IMPLANTES EN UN KIT | FÁCIL & CÓMODO

CANT. EQUIPO

- 2 Alambre guía con punta roscada Ø 3.2 x 343
- 2 Alambre guía con punta roscada Ø3.2 x 300
- 1 Medidor de profundidad 0 – 110 mm
- 1 Punta de desarmador hexagonal SW 4.5 mm
- 2 Tornillo de conexión M8x1 / SW11
- 1 Llave Allen SW3.0 mm
- 1 Broca proximal graduada Ø12.5 / Ø3.2
- 1 Punzón canulado
- 1 Mango sujetador de alambre guía
- 2 Alambre guía con punta oliva Ø 2.5/ Ø4.0/680
- 1 Llave española SW11
- 2 Punzón Ø4.0
- 1 Varilla de reducción canulada con mango en T
- 1 Guía de alambre guía Ø3.2 / Ø12.5
- 1 Mango en T de anclaje rápido
- 1 Adaptador
- 1 Desarmador con punta hexagonal SW3.5
- 1 Destornillador de bloqueo con mango en T SW4.5/M3.0
- 1 Guía de extracción de clavo M8x1 / Ø10 / Ø4.0
- 1 Mango de fibra de carbono
- 1 Protector de camisa con mango Ø12.5
- 2 Camisa exterior Ø10/Ø8.1 x 155
- 2 Camisa interior Ø4.0
- 1 Martillo deslizante
- 2 Broca Ø4.0x300
- 1 Broca con tope Ø4.0/SW3.0
- 1 Plantilla
- 1 Shaft flexible para punta de rima
Ø 9mm, Ø 10mm, Ø 11mm, Ø 12mm, Ø 13mm.

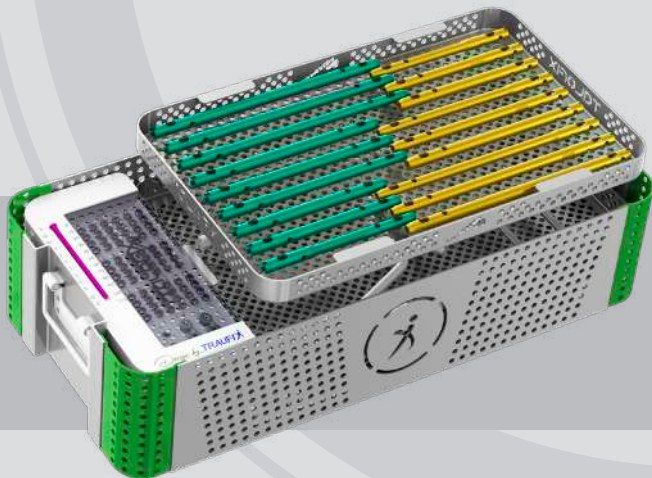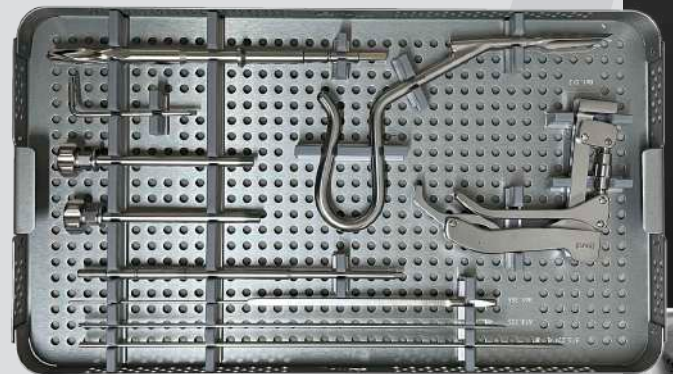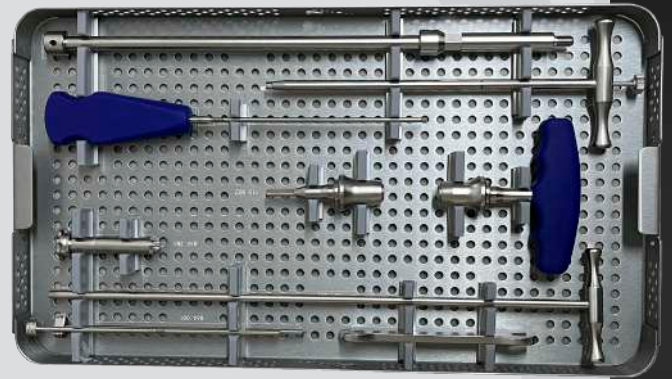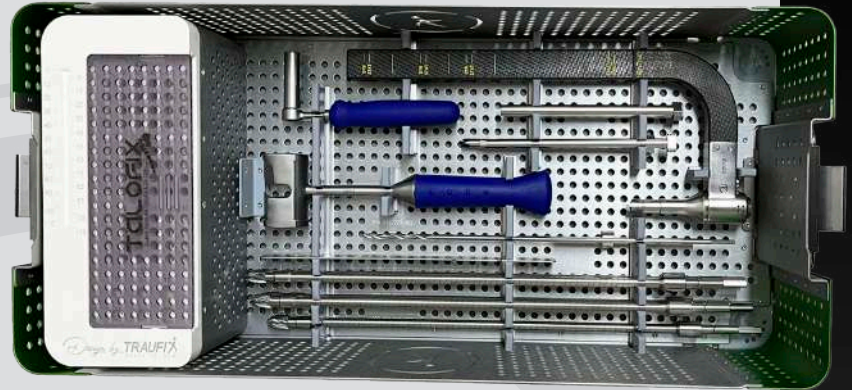

TRAUFIX

internationalsales@traufix.com.mx
(+52) 55 8106 3240

www.traufix.com

DIPROMEDIC MÉXICO

customerservice@dipromedic.com
(55) 9000 4888/ 89/ 90/ 91

DIPROMEDIC PERÚ

gustavo.dominguez@dipromedic.com
ventas.interdipro.peru@dipromedic.com
(+51) 947 732 069

 traufix.mx

 traufix