
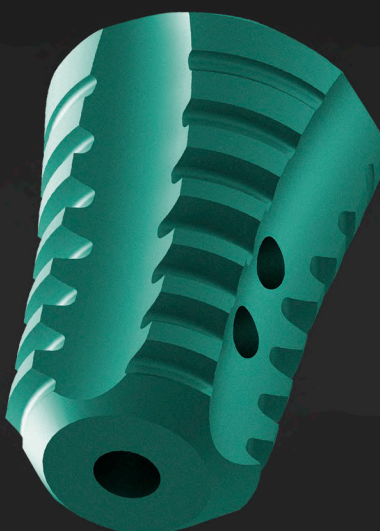


TARFIX^{MR}

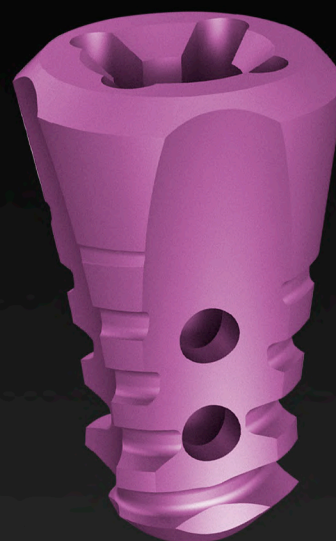


TRAUFIX
READY TO RUN

TORNILLO SUBTALAR CANULADO PARA CORRECCIÓN DEL PIE PLANO VALGO TARFIX

TORNILLO SUBTALAR CANULADO PARA CORRECCIÓN DEL PIE PLANO VALGO TARFIX


DISEÑO CÓNICO

- ▶ Ajuste por presión; sujeción estable.
- ▶ Adaptación anatómica.
- ▶ Facilita inserción y extracción.

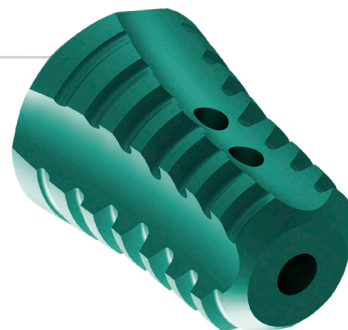


4 CANALES OVALADOS


- ▶ Disminución del área de contacto directo: menor fricción y menor irritación.
- ▶ Favorece la integración tisular y circulación.
- ▶ Flexibilidad estructural controlada.

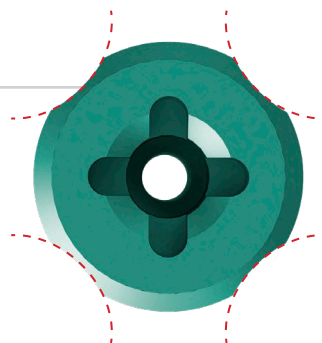


DOS ORIFICIOS EN EL CUERPO para mejor osteointegración

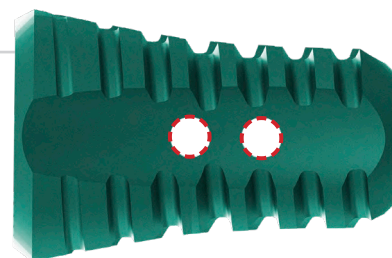

CUERDAS INTERNAS EN EL CUERPO DEL TORNILLO Permite introducir desarmador extractor (251.01) que es de cuerda izquierda para una extracción mucho más eficiente.

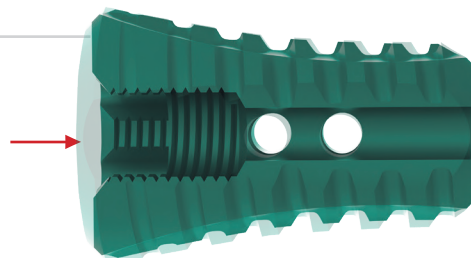

MEDIDAS

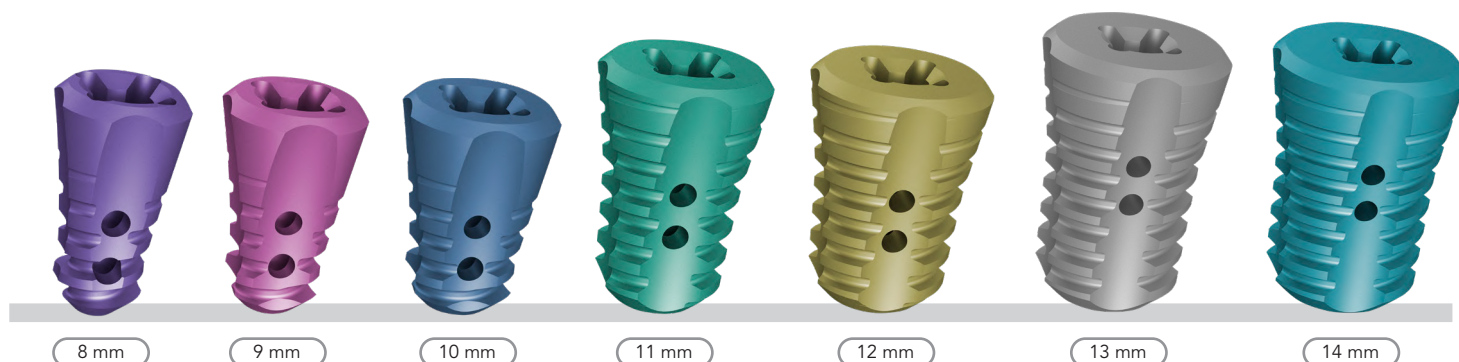



ENTRADA DE DESARMADOR EN CRUZ
para mejorar la tracción al momento de inserción.

Especificaciones

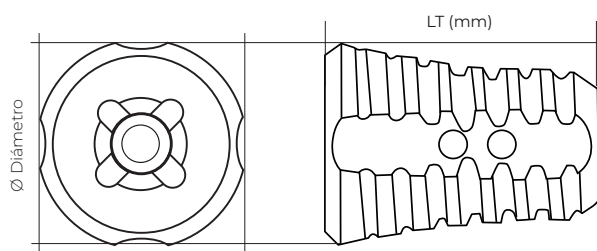


Tabla de longitud

TORNILLO SUBTALAR CANULADO PARA CORRECCIÓN DEL PIE PLANO VALGO TARFIX

CÓDIGO	DIÁMETRO	LT (mm)
262.08	8	14.00
262.09	9	14.00
262.10	10	14.00
262.11	11	16.00
262.12	12	16.00
262.13	13	19.00
262.14	14	19.00



Aleación de Titanio 6Al4V ELI ASTM F136

Especial para implantes quirúrgicos

Design by **TRAUFIX**
READY TO RUN



HECHO EN MÉXICO

TARFIX INSTRUMENTAL

CANT. EQUIPO

- 1 Desarmador para extracción de tornillo Tarfix. (Cód. 251.01)
- 1 Desarmador de cruceta para inserción de tornillo Tarfix. (Cód. 251.02)
- 1 Alambre guía punta roma diámetro 2.0mm longitud 265mm. (Cód. 318.2026)
- 1 Probador para tornillo Tarfix medidas:
8mm (Cód. 319.08) , 9mm (Cód. 319.09), 10mm (Cód. 319.10) , 11mm (Cód. 319.11),
12mm (Cód. 319.12), 13mm (Cód. 319.13) y 14mm (Cód. 319.14).



Nuestros contenedores para implantes y tornillerías son fabricados
con **TECAPRO MT** (Polipropileno Estabilizado Térmicamente)
PP Grado Médico

Material ideal para contenedores de esterilización

TRAUFIX

internationalsales@fixier.com.mx
(+52) 55 8106 3240

www.traufix.com

DIPROMEDIC MÉXICO

customerservice@dipromedic.com
(55) 9000 4888/ 89/ 90/ 91

DIPROMEDIC PERÚ

gustavo.dominguez@dipromedic.com
ventas.interdipro.peru@dipromedic.com
(+51) 947 732 069

